

nursicare

by PolyMem®

Hojivé sterilní prsní vložky

- pro kojící matky
- zklidňují citlivé, bolavé, podrážděné nebo popraskané bradavky

Pokud máte dotazy,
zavolejte nám číslo:



Bc. Kerlesová
777 919 360

nebo navštivte webové stránky:



www.quadracare.cz



facebook.com/bezbolestnekojeni

objednávejte na:



prodej@quadracare



www.nursicare.cz



zastoupení v České republice:
QuadraCare CZ, s.r.o., Hlinky 64, 603 00 Brno,
tel.: +420 543 215 444, fax: +420 543 215 447



distribuce v České republice:
QuadraLog s.r.o.

nursicare

by PolyMem®

Sterilní prsní vložky pro kojící matky zklidňují citlivé,
bolavé, podrážděné nebo popraskané bradavky.



Proč kojit?

Kojení je přirozený projev mateřství a existuje mnoho zdokumentovaných výhod kojení pro zdraví a pohodu matky i jejího dítěte.

Mateřské mléko obsahuje dokonalou směs výživných látek pro kojence a často je lépe stravitelné než umělá výživa. Mateřské mléko také obsahuje hormony a protilátky, které dětem pomáhají proti nemocem.

Kromě toho se také prokázalo, že kojení má pozitivní účinky na psychiku a že snižuje riziko výskytu některých nemocí u matek.

Význam kojení je tedy zjevný, ale některé ženy s kojením přestávají, protože mají rozbolavělé bradavky.

Proč hojivé prsní vložky Nursicare?

Hojivé vložky **Nursicare** představují nový a účinný způsob pro udržení zdravých bradavek během kojení.

Hojivé prsní vložky **Nursicare** jsou vyrobeny z materiálu **PolyMem**, který již více než 30 let prokazatelně pomáhá při zmírňování bolesti a zlepšování hojení poranění všeho druhu (www.quadracare.cz).


Vložka s absorpční membránou má podkladní vrstvu z tenké potištěné fólie, která zabraňuje prosakování a znečištění. Vložka je prodyšná, což také vede k lepšímu hojení. Vložky **Nursicare** neobsahují latex.

Hojivé prsní vložky **Nursicare** použijte již při prvním příznaku bolesti, abyste ulevili bolesti bradavek způsobené sáním kojence. Vložky **Nursicare** také zklidňují citlivé, bolavé, podrážděné, a popraskané bradavky.

Hojivé prsní vložky **Nursicare** jsou bezpečné, netoxické a neobsahují žádná léčiva.

Jak je použít?

- Noste hojivé prsní vložky **Nursicare** v podprsence potištěnou stranou ven a nepotištěnou stranou na bradavce. Umístěte prsní vložku středem na bradavku.
- Před kojením nebo před použitím odsávačky omyjte prs čistou navlhčenou žínkou nebo utěrkou a vysušte jemným poklepáním.
- Při samotném kojení uložte prsní vložku **Nursicare** na čisté a suché místo nepotištěnou stranou nahoru.
- Prsní vložka **Nursicare** se může používat, dokud není absorbovaná vlhkost viditelná přes potištěnou zadní stranu vložky.
- Prsní vložky **Nursicare** nejsou prateľné. Při praní by mohlo dojít k úbytku materiálu a nežádoucím změnám.
- Po použití zlikvidujte. Opakované použití může způsobit kontaminaci. Pokud je vložka nasáklá, vyměňte ji.

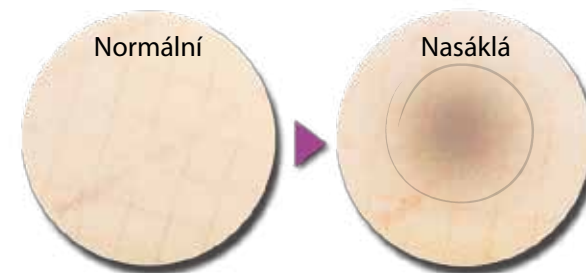

Mnoho matek potvrdilo úplné zhojení potíží vzniklých kojením již po použití jednoho balení vložek **Nursicare**.